

整房輸出平台說明

文件

榮順軒有限公司

02-89839352

- 輸入網址 <http://www.nhiot.rsx.ocm.tw:2000> 後即可進入管理系統的登入畫面，

此畫面分為星聯宏和管理畫面及護理院所管理畫面，詳細說明如下。



星聯宏和管理畫面

- 於登入畫面輸入帳號:staq 密碼:staq，即可進入管理畫面。接續點擊右上角「新增院所」以新增護理院所



- 依畫面輸入框「院所識別碼」及「院所名稱」進行資料填寫(如:dbRSX、容易護理)，完成後點選「確定」即可新增完成



- 完成後即可於畫面瀏覽，建立之院所資料。其中「授予帳號」及「授予密碼」為該院所登入之帳密，須於建立完成後將此資料給予該院所管理者在登入畫面進行登入。



護理院所管理畫面

- 登入後即為系統主頁面，但因尚未建立設備，因此須於右上角「設置」進行樓層、設備、群組等建立事項。




樓層管理

- 首先進行樓層新增，可於畫面右上角「新增樓層」進行樓層新增



- 樓層數可依照院所自家樓層數進行建立

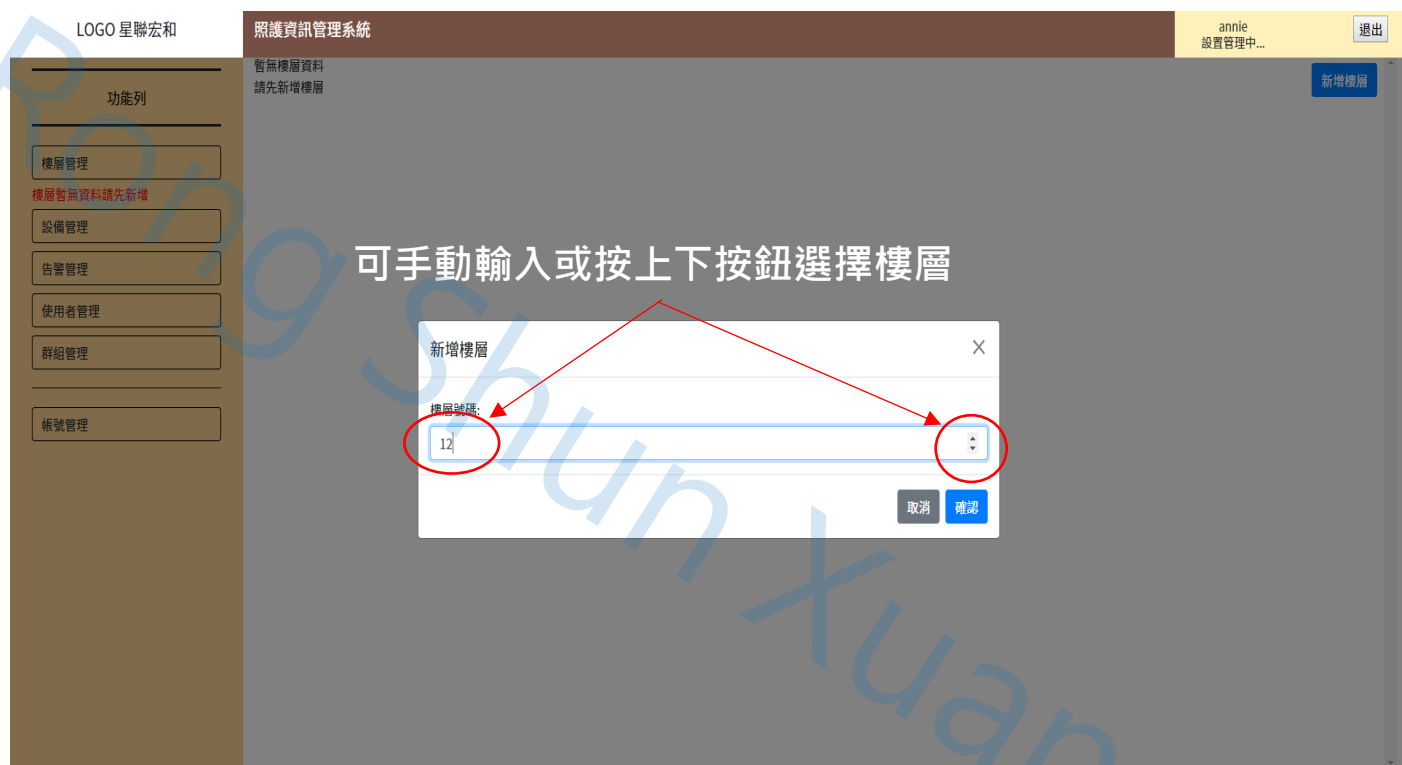

- 樓層新增完成後，可於畫面上瀏覽院所當前所有樓層，而後方有「新增房號」可點選新增該樓層之房間號碼。



- 房間數可依照院所自家房間數進行建立



- 新增完樓層及房號後將如下圖，



設備管理

- 點擊左側選單「設備管理」，進行閘道器及其餘 11 項設備之新增

LOGO 星聯宏和 照護資訊管理系統 annie 設置管理中... 退出

功能列

樓層管理

設備管理

閘道器

床

睡眠帶

感知照明

加濕器

空氣質量

血壓計

脂肪計

電動桌

電動沙發

血糖計

額溫計

告警管理

使用者管理

群組管理

點擊設備管理出現各設備選項

1樓 刪除 新增房號

101房號 刪除 102房號 刪除 103房號 刪除 104房號 刪除

2樓 刪除 新增房號

201房號 刪除 202房號 刪除 203房號 刪除 204房號 刪除

3樓 刪除 新增房號

301房號 刪除 302房號 刪除 303房號 刪除 304房號 刪除

4樓 刪除 新增房號

401房號 刪除 402房號 刪除 403房號 刪除 404房號 刪除

新增樓層

- 點擊閘道器標籤後再點選「新增閘道器」進行新增。

LOGO 星聯宏和 照護資訊管理系統 annie 設置管理中... 退出

暫無資料請先點擊右方按鈕新增資料

功能列

樓層管理

設備管理

閘道器

床

睡眠帶

感知照明

加濕器

空氣質量

血壓計

脂肪計

電動桌

電動沙發

血糖計

額溫計

告警管理

使用者管理

群組管理

新增閘道器

- 依輸入框之資料進行填寫，其中「識別碼」為閘道器產品之 MAC(如: 09:C7:AB:4D:66，則輸入 09C7AB4D66)，「樓層」及「房號」將依樓層管理之資訊顯示，「連接裝置」須於其餘 11 項設備建置完成後方可選擇，且目前僅能關聯於「連接裝置-1」，其餘為後續擴充用。

LOGO 星聯宏和

照護資訊管理系統

annie 設置管理中... 退出

新增閘道器

暫無資料請先點擊右方按鈕新增

功能列

樓層管理

設備管理

閘道器

床

睡眠帶

感知照明

加濕器

空氣質量

血壓計

脂肪計

電動桌

電動沙發

血糖計

體溫計

告警管理

使用者管理

群組管理

識別碼:

名稱:

描述:

樓層:

暫無

房號:

暫無

連接裝置-1:

暫無

連接裝置-2:

暫無

連接裝置-3:

暫無

連接裝置-4:

暫無

取消 確認

- 閘道器新增完成後畫面如下

LOGO 星聯宏和

照護資訊管理系統

倪家成 設置管理中... 退出

新增閘道器

顯示 10 項結果

搜索:


識別碼	名稱	描述	樓層	房號	連接裝置-1	連接裝置-2	連接裝置-3	連接裝置-4	
09C7AB4D66	617-456	無	1	101	暫無	暫無	暫無	暫無	修改 刪除

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

上页 1 下页

點擊此處可修改及刪除

- 點擊床標籤後再點選「新增床」進行新增。

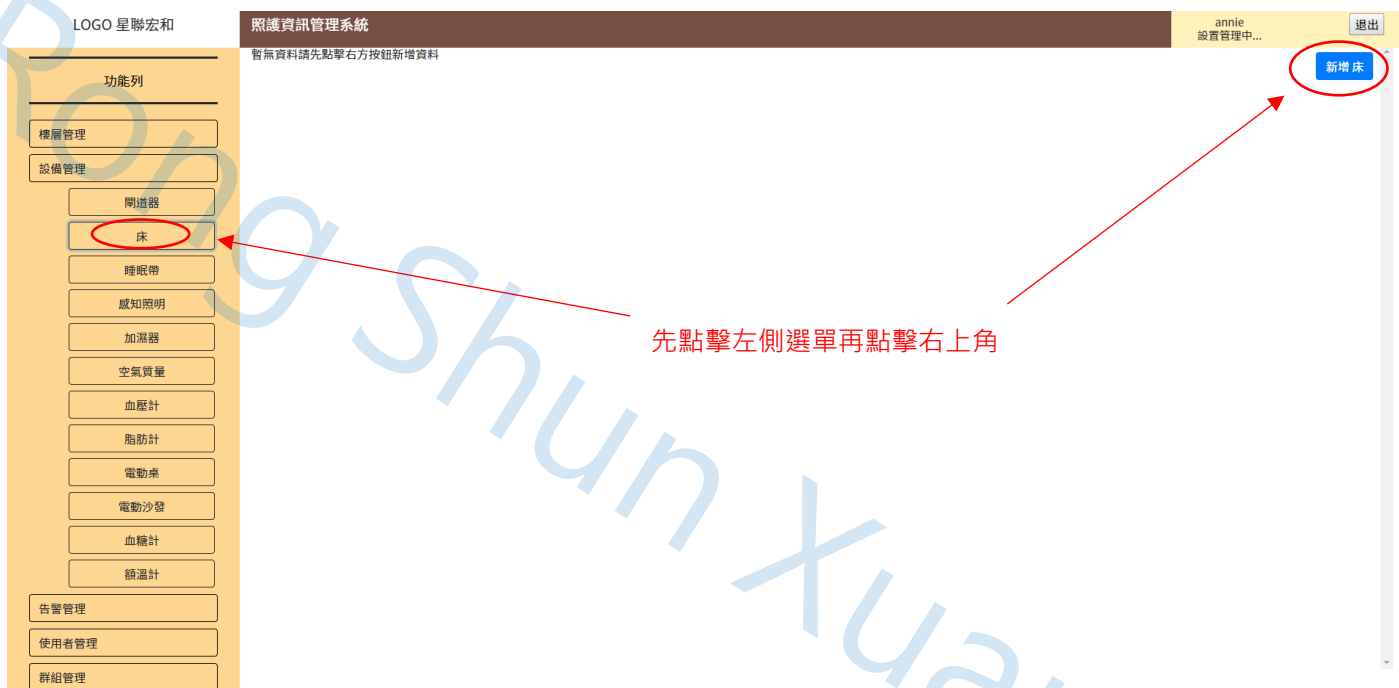

- 依輸入框之資料進行填寫，其中「識別碼」為設備產品之 MAC(如: 09:C7:AB:4D:66，則輸入 09C7AB4D66)，「樓層」及「房號」將依樓層管理之資訊顯示，「使用者」將依使用者管理之資訊顯示，以將設備數據與使用者關聯，「UUID」為設備產品之 UUID(如: 4ab5a26c-e728-11e9-81b4-2a2ae2dbcce4)。(11 項設備建置方式相同，故不一一說明)。



- 設備新增完成後畫面如下，之後閘道器可對應設備連接

LOGO 星聯宏和 照護資訊管理系統 管理者 設置管理中... 退出

功能列

樓層管理

設備管理

閘道器

床

睡眠帶

感知照明

加濕器

空氣質量

血壓計

脂肪計

電動桌

電動沙發

血糖計

體溫計

告警管理

使用者管理

顯示 10 項結果

識別碼 名稱 描述 房號 使用者 服務UUID 接收UUID 發送UUID

8AC452B33F4 654-23 無 101 暫無 9fe3dfc0-e736-11e9-81b4-2a2ae2dbccce4 9fe3e222-e736-11e9-81b4-2a2ae2dbccce4 9fe3e376-e736-11e9-81b4-2a2ae2dbccce4

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

上頁 1 下頁

新增床

修改 刪除

此處可以名稱搜尋

點擊此處可修改及刪除

告警管理

- 點擊左側選單告警管理，此頁將顯示目前已建立之設備，以於畫面右側「設定」設備之告警值。

LOGO 星聯宏和 照護資訊管理系統 良家成 設置管理中... 退出

功能列

樓層管理

設備管理

告警管理

床

睡眠帶

感知照明

加濕器

空氣質量

血壓計

脂肪計

電動桌

電動沙發

血糖計

體溫計

使用者管理

群組管理

帳號管理

顯示 10 項結果

識別碼 設備名稱 呼吸 心跳 翻身

73C7cB4D66 456-54 暫無 暫無 暫無

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

上頁 1 下頁

設定

此處可以設定設備告警值

- 告警值可依照院所自家設想進行設定/不設定。

LOGO 星聯宏和

照護資訊管理系統

显示 10 项结果

搜索:

識別碼	設備名稱	呼吸	心跳	體身
73C7c84D66	456-54	暫無	暫無	暫無

显示第 1 至 1 项结果，共 1 项

上页 1 下页

456-54 告警值

呼吸: 66 ☐ 不設定

心跳: 72 ☐ 不設定

體身: 10 ☐ 不設定

確認 取消

使用者管理

- 點擊左側選單使用者管理，可於畫面右上角「新增使用者」進行新增使用者。

LOGO 星聯宏和

照護資訊管理系統

显示 10 项结果

搜索:

病例號	姓名	電子信箱	聯絡電話	房號
-----	----	------	------	----

表中数据为空

显示第 0 至 0 项结果，共 0 项

上页 下页

新增使用者

點擊此按鈕新增使用者

- 依輸入框之資料進行填寫，「樓層」及「房號」將依樓層管理之資訊顯示。

LOGO 星聯宏和

照護資訊管理系統

良家成
設置管理中...

退出

新增使用者

顯示 10 項結果

搜索:

新增使用者

病例號

姓名

電子信箱

聯絡電話

房號

表中數據為空

顯示第 0 至 0 項結果，共 0 項

上頁 下頁

新增使用者

病例號:

姓名:

電子信箱:

聯絡電話:

樓層:

暫無

房號:

暫無

取消 確認

- 使用者新增完成後畫面如下，之後設備可對應使用者連接

LOGO 星聯宏和

照護資訊管理系統

良家成
設置管理中...

退出

新增使用者

顯示 10 項結果

搜索:

病例號	姓名	電子信箱	聯絡電話	房號		
54-6544	良家成	asd74125@gmail.com	0978451235	101	修改	刪除

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

上頁 1 下頁

群組管理

- 點擊左側選單群組管理，右上角「新增群組」可選擇多個設備名稱組成群組



- 依輸入框之資料進行填寫，「選擇設備」將依同種設備種類給予選擇。



- 群組新增完成後畫面如下




帳號管理

- 點擊左側選單帳號管理，右上角「新增帳號」進行新增帳號。此頁預設會顯示管理者之帳號及密碼



- 依輸入框之資料進行填寫，「帳號」及「密碼」將為其他帳號進入平台之帳號。

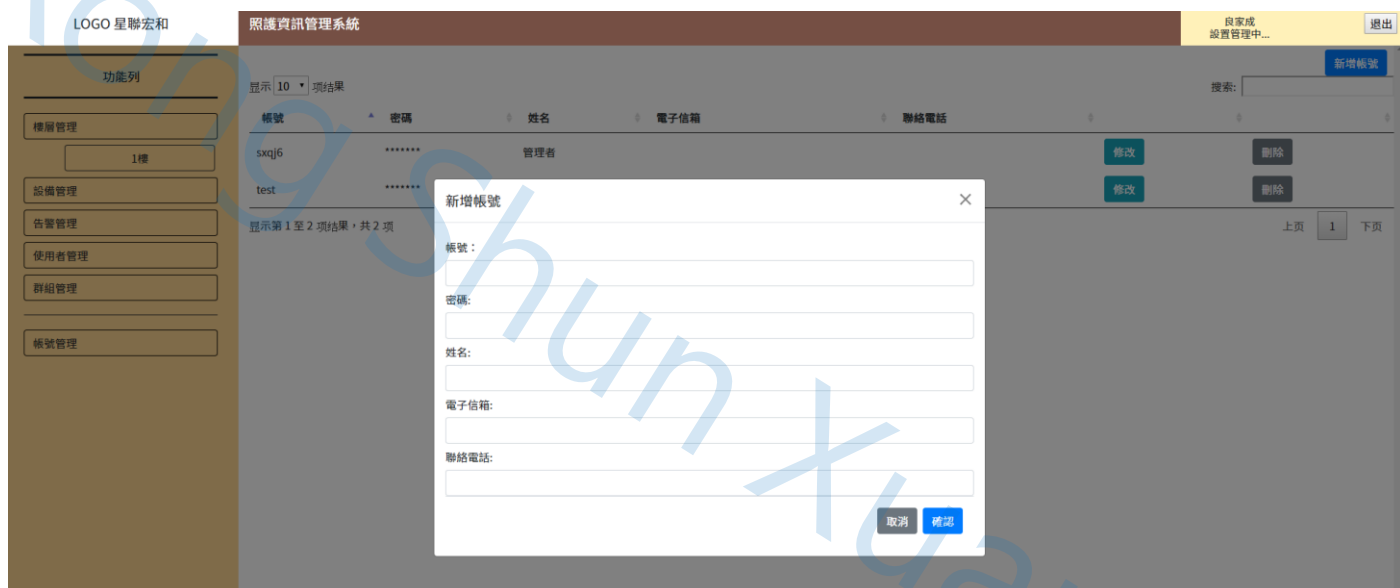

主頁面

- 當所有設置完成退出後主頁面之「個人管理」標籤頁呈現如下，各樓層、房號內及使用者將依設置內容顯示，且也顯示其最近之睡眠帶數據，並依照告警值是否超標而更改顏色樣式。



- 主頁面之「群組管理」標籤頁呈現如下，將依設置群組內容顯示群組名稱及內部成員。




監控頁面

- 監控頁面之設備標籤頁將依設置所連結之設備顯示於頂端，畫面左側為使用者資訊及設備告警區塊，護理人員可點選「排除」以解除超標情況。畫面右側包含排程及控制監測標籤頁。



- 點選排程日曆上任意時間點即可進行設定，使其於規定時間調整至設定角度。(目前僅有護理床有排程)

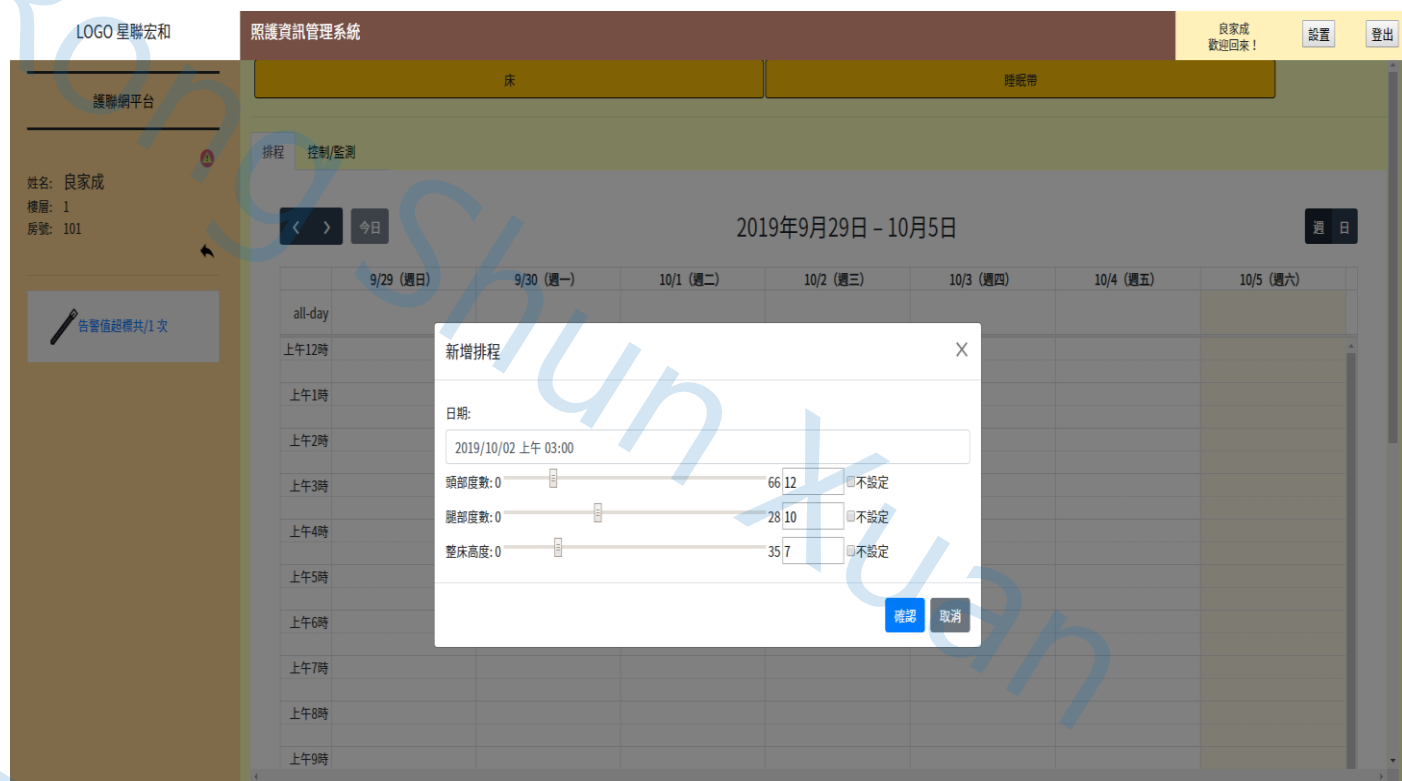

- 控制畫面如下，護理人員須點擊「連接狀態」以使閘道器與設備藍芽連結成功，進而進行遠端控制護理床。



- 監測畫面如下，護理人員可於圖表中瀏覽使用者之頭部及腳部之角度資訊。



APP 設定閘道器連結 WIFI 頁面

- 進入 APP 畫面後，點選「掃描藍芽裝置」將詢問開啟手機藍芽功能。



- 開啟手機藍芽後，點選「掃描藍芽裝置」將掃描目前開放廣播的藍芽設備，接著點選對應的 MAC 進行 WIFI 設定，點選後閘道器將會亮藍燈表示藍芽已連結。設定完成即可關閉 APP。



THE END

THE END

又件

榮順軒有限公司

02-89839352